



Гинекологическое кресло

FG-04.0



Изделие изготовлено
из антибактериального материала.



Гинекологическое кресло FG-04.0



Кресло FG-04.0 с подлокотниками и подколениками WF-42.0



Кресло FG-04.0 с секцией голени WF-22.3



Кресло FG-04.0 с опорами для ступней без регулировки длины дуги WF-36.0

Назначение

Кресло FG-04.0 предназначено для поддержания пациентки во время проведения гинекологических осмотров и процедур. Также может использоваться для урологических осмотров и процедур.

Стандартная конструкция

- Несущая конструкция кресла покрыта порошковой краской и закрыта кожухами из пластмассы ABS
- Мобильное основание с центральной блокировкой ходовой системы
- Регулировка высоты сиденья, независимая регулировка угла наклона сиденья, изменение угла наклона спинки вместе с секцией сиденья осуществляются при помощи электроприводов на номинальное напряжение 24 В DC с помощью ножной панели управления
- Регулировка наклона Тренделенбурга и Антитренделенбурга осуществляется электроприводом при одновременном изменении угла наклона спинки и секции сиденья и управляется при помощи переключателя на напряжение 24 В DC.
- Кресло имеет: бесшовную обивку, гинекологический лоток из нержавеющей стали, рулон гигиенических простыней, расположенный на кронштейне в контейнере за спинкой, а также рельсы для крепления аксессуаров в сиденье и спинке

Преимущества кресла FG-04.0

- Обеспечивает полную безопасность пациентки
- Точные электроприводы уверенно и без усилий со стороны обслуживающего персонала позволяют получить и поддерживать нужные положения кресла
- Возможность выбора цвета обивки из широкой палитры цветов
- Бесшовная обивка и формы кожухов помогают поддерживать кресло в чистоте
- Используемые материалы устойчивы к воздействию чистящих средств
- Благодаря богатому оснащению пользователь может выбрать оптимальную версию кресла
- Ходовая система для прямолинейного движения
- Кресло на мобильном основании с центральной блокировкой ходовой системы облегчает перемещение кресла для поддержания пола в чистом состоянии

Варианты исполнения кресла

- Кресло с ножным и ручным управлением, с проводного пульта с возможностью программирования трех произвольных позиций кресла

Предлагаемое оборудование

- Опора для стопы без регулировки длины дуги WF-36.0
- Упор для руки с подколеником WF-42.0
- Подставка (ступенька из ламинированной плиты) WF-03.5
- Стремя для ноги WF-23.0
- Сегмент голени WF-22.3
- Инфузионная стойка WK-01.5
- Опора для руки WS-07.5
- Урологический лоток WF-52.2
- Проводной пульт управления с возможностью программирования выбранных элементов только для версии кресла с возможностью программирования



Проводной пульт управления с возможностью программирования положения (опция)



Урологический лоток WF-52.2 (опция)



Стремя WF-23.0 (опция), установленное на кронштейне подколеника



Центральная блокировка



Контейнер для бумажной гигиенической простыни

Технические характеристики

Общая длина ложа в горизонтальном положении:	
• с секцией голени	1750 мм
• без секции голени	1300 мм
Общая ширина ложа	745 мм
Ширина сиденья	570 мм
Ширина спинной секции	565 мм
Регулировка высоты сиденья (в положении кресла при горизонтальном сидении)	от 560 до 860 мм
Регулировка высоты ложа (в горизонтальном положении)	от 780 до 1080 мм
Угол подъема спинки	от -10° до +65°
Диапазон регулировки угла наклона сиденья	от -65° до +5°
Положение Тренделенбурга	10°
Положение Антитренделенбурга	65°
Питание	230 В ~, 50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	300 ВА
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип рабочей части	B
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP-X4
Допустимая нагрузка	200 кг
Объем гинекологического лотка	4 л

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Head Office:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department:
tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

expo.famed@famed.com.pl
www.famed.com.pl




Функции кресла, реализуемые с помощью
ножного управления и опционально с помощью
пульта дистанционного управления


-10° до +65°




от 560 до 860 мм
(при горизонтальном
сидении)

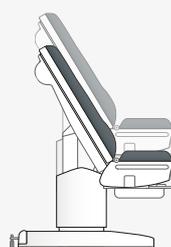

-65° до +5°

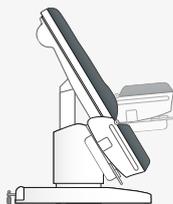

10°

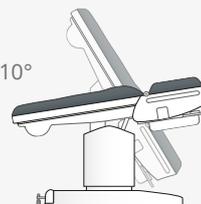

65°



Продукт соответствует требованиям Европейской директивы
MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности
медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного
уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием
научно-технического прогресса



www.famed.ru