



SZ-01.0

Операционно-процедурный стол



Изделие изготовлено из материалов
с антибактериальными свойствами.

www.famed.com.pl

www.famed.ru



Операционно-процедурный стол

SZ-01.0

Назначение

предназначен для проведения перевязочных процедур, простых хирургических, ортопедических, проктологических, гинекологических, ларингологических, урологических и других подобных операций.

Полное предложение специального оборудования – в каталоге «Дополнительные принадлежности для операционных столов».



Конструкция стола

- Конструкция стола обеспечивает мониторинг пациента и выполнение рентгеновских снимков во время процедур и операций.
- Бесшовные матрасы, выполненные из мягкой полиуретановой пены, а также металлические поверхности стола, которые легко чистятся и устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.

Функциональные регулировки

- Основание с возможностью качения и центральной блокировкой всех колес обеспечивает легкую остановку и фиксацию стола.
- Высота стола регулируется при помощи ножного насоса.
- Установка сегментов столешницы поддерживается пневматическими пружинами.
- Стол может быть выполнен в лакированной версии (SZ-01.0) или из нержавеющей стали (SZ-01.5).

Тренделенбург



антиТренделенбург





Варианты использования



Стол SZ-01.0 с боковыми поручнями WS-32.5



Стол SZ-01.0 со специальным подголовником WS-21.5




Стол SZ-01.0 с гинекологической приставкой WS-28.0 и подколениками WS-05.5



Стол SZ-01.0 с проктологической приставкой WS-30.0



Позиция сидения

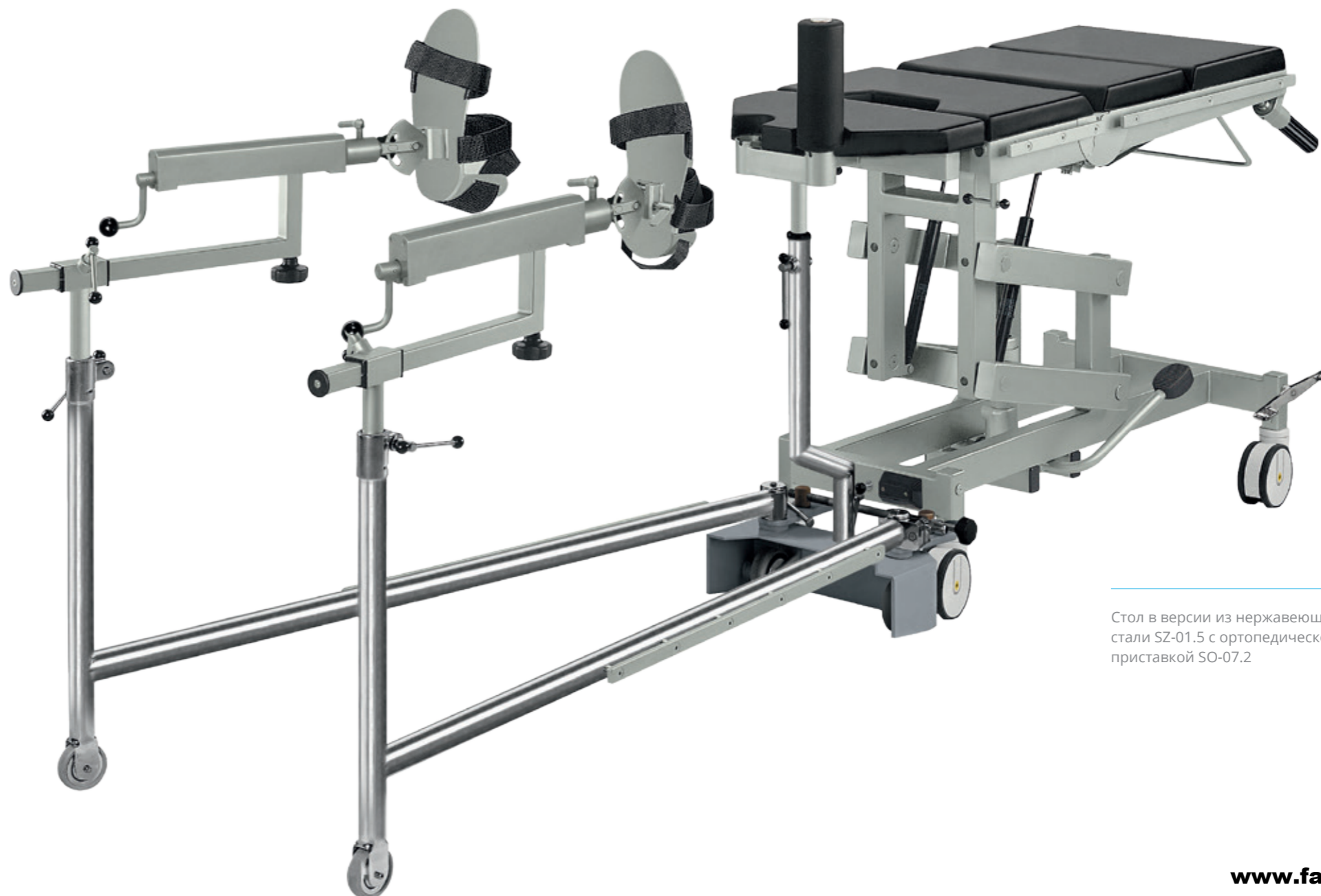

Стол в версии из нержавеющей стали SZ-01.5 с ортопедической приставкой SO-07.2



Операции головы и шеи




Стандартные функции и варианты столешниц

Возможность снятия сегментов столешницы



R-прозрачность

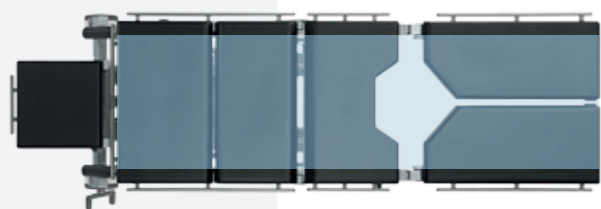

Диапазон прозрачности для рентгеновского излучения с помощью выдвижной вставки RTG



Гнездо специального подголовника



Возможность снятия матраса

Предлагаемое дополнительное оснащение



Специальный подголовник WS-21.5 и упор для рук врача WS-22.5



Матрас заполнения WS-67.0



Рамка экрана WS-01.5



Подпирающий валик WS-08.5



Держатель кассеты RTG WS-12.0



Боковой держатель RTG WS-33.0



Опора плечевого пояса WS-06.5



Опора бедра WS-03.5



Выдвижная вставка RTG WS-11.5

Полное предложение специального оборудования – в каталоге «Дополнительные принадлежности для операционных столов».

Технические характеристики

Полная длина стола	2020 мм
Полная ширина стола	550 мм
Минимальная высота столешницы	810 мм
Максимальная высота столешницы	1050 мм
Позиция Тренделенбурга	25°
Позиция анти-Тренделенбурга	12°
Угол наклона опоры спины	-40° до +80°
Угол наклона подголовника	-40° до +50°



Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland


Head Office:

tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department:

tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

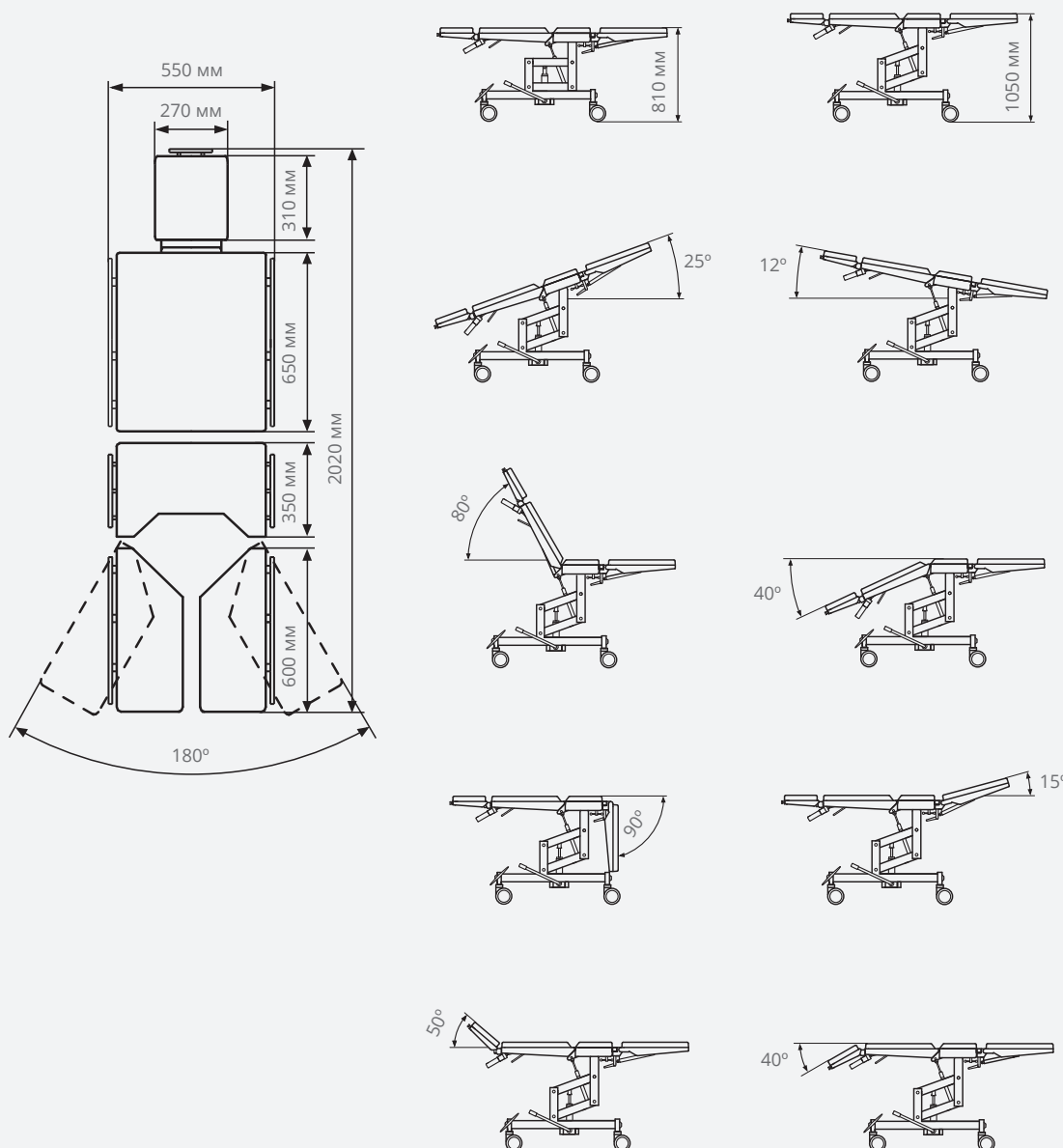

Изделия соответствуют требованиям Европейской директивы MDD 93/42/EEC в отношении медицинских изделий и Закона о медицинских изделиях.

Издание: 05/2016/01. Сохраняется возможность введения модификаций в связи с техническим прогрессом.



www.famed.ru